


gingifast

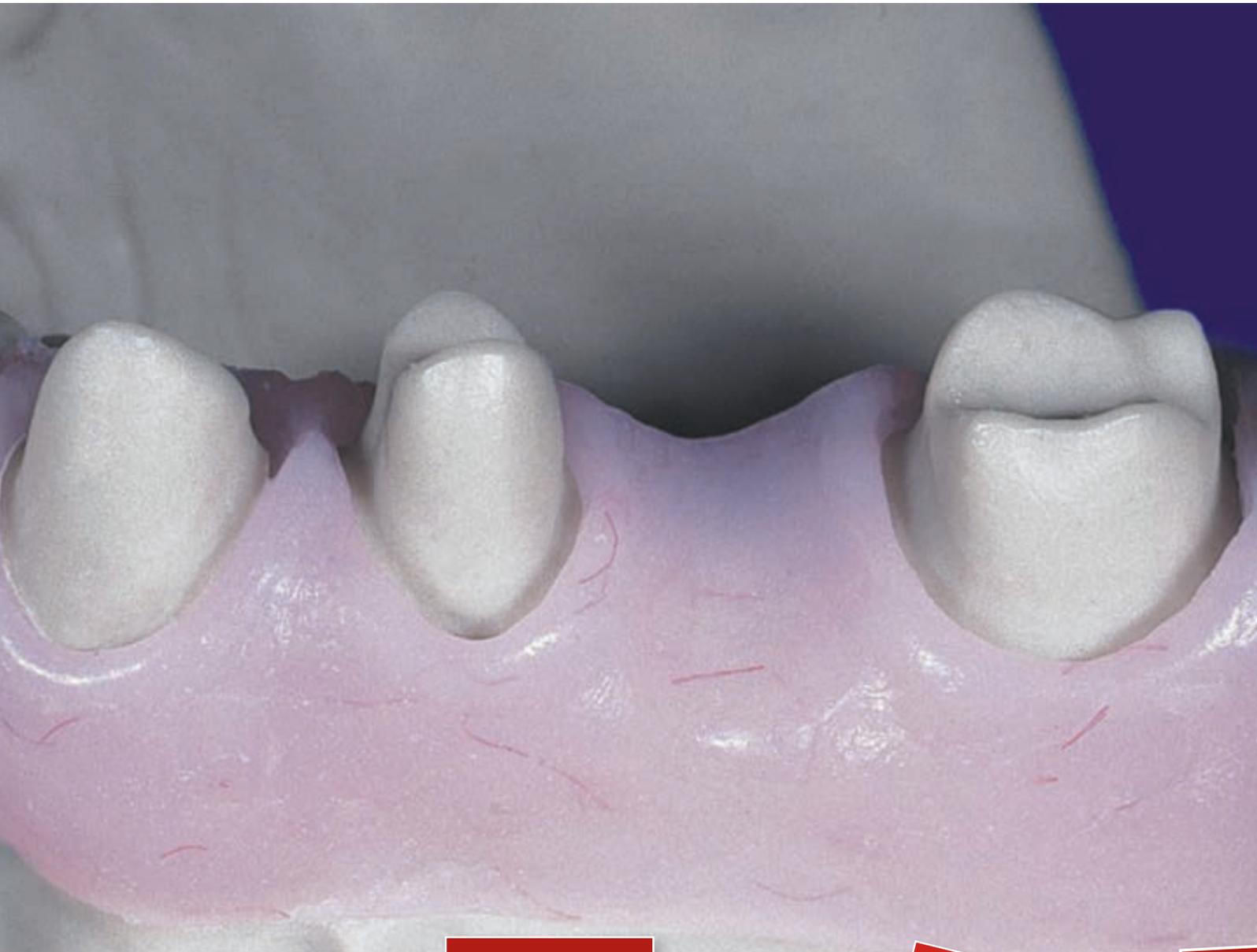

Technical
A-Silicone for Gingival Mask

Zhermack 
Dental

gingifast elastic

La estética natural.

APLICACIONES

La **reproducción gingival en polivinilsiloxano**, con sistema de **automezcla**, permite obtener en un tiempo breve la morfología correcta durante la realización de la prótesis fija.

ESTÉTICA

El **resultado estético de GINGIFAST ELASTIC** se obtiene gracias a su **translucidez** y a la presencia de vascularización que le confieren un efecto natural.



1 Modelo principal con llave realizada en Zetalabor



2 Aplicación de Gingifast Separator a la llave obtenida con Zetalabor



3 Detalle del espacio obtenido en el modelo principal para la inyección de Gingifast Elastic



4 Colocación de la llave de Zetalabor al modelo e inyección de Gingifast Elastic



5 Detalle de la máscara gingival después del acabado



6 Trabajo terminado sobre el modelo principal

gingifast

gingifast rigid

Versátil y fácil de fresar.

APLICACIONES


La reproducción gingival utilizada en **implanto-prótesis** simula el acondicionamiento del tejido gingival para la determinación de la forma de los bordes cervicales y el perfil de emergencia de la prótesis.

DUREZA

La **dureza equilibrada** facilita el **fresado** de los bordes durante el acabado de la encía en el modelo.




1 Encofrado (boxing) de la impresión

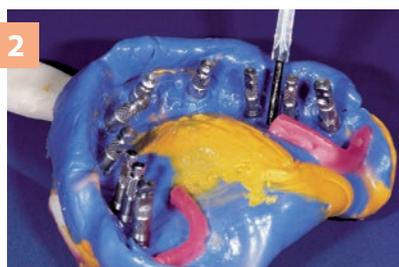

2 Aplicación de Gingifast Separator a la impresión




3 Detalle de la punta inmersa durante la extrusión

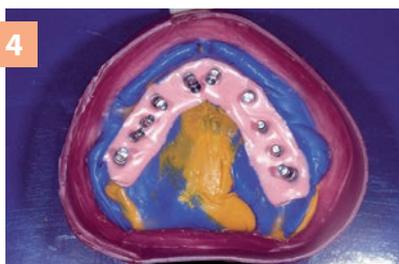

4 Impresión encofrada para el vaciado final del modelo



5 Detalle de la encía reproducida

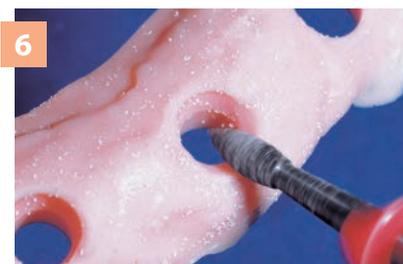

6 Facilidad de fresado

gingifast



F191011 - 2016-02

Confecciones

C401500 GINGIFAST ELASTIC	2 cartuchos de 50 ml + 12 puntas para mezcla amarillas + 1 Separator + 12 puntas intraorales amarillas + 1 nebulizador
C401520 GINGIFAST RIGID	2 cartuchos de 50 ml + 12 puntas para mezcla amarillas + 1 Separator + 12 puntas intraorales amarillas + 1 nebulizador

Accesorios

C202100 DISPENSER D2	Dispensador D2 - 1:1
C202070 MIXING TIPS SMALL/YELLOW	Puntas de mezcla amarillas (48 pz)
C202090 ORAL TIPS SMALL/YELLOW	Puntas intraorales amarillas (48 pz)

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH Deutschland
 Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
 F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
 info@zhermack.de
 www.zhermack.de

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
 ul. Augustówka 14
 02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
 +48 22 292 71 17
 F +48 22 642 07 14
 biuro@zhermack.com
 www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
 P.O. Box 4195, River Edge
 New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
 +1 (732) 389 8540
 F +1 (732) 389 8543
 info@zhermackusa.com
 www.zhermackusa.com

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
 T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack